




## DISPENZORI

		
<p><b>SUPREM BOTTLE TOP DISPENSER OSNOVNI MODEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kataloški broj: ABDE11701 kapacitet:0.25-2.5 ml</li> <li>• kataloški broj: E11702 kapacitet: 0.50 – 5 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11703 kapacitet:1 – 10 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11704 kapacitet: 2.5 – 30 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11705 kapacitet: 5 – 60 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11706 kapacitet10 – 100 ml</li> </ul>	<p><b>SUPREM PLUS BOTTLE TOP DISPENSER</b></p> <p>Supreme Plus ima recirkulacijski ventil za preusmjeravanje tekućine u bocu za punjenje bez mjehurića bez gubitka reagensa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kataloški broj: ABDE11711 kapacitet:0.25-2.5 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11712 kapacitet: 0.50 – 5 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11713 kapacitet:1 – 10 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11714 kapacitet: 2.5 – 30 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11715 kapacitet: 5 – 60 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11716 kapacitet10 – 100 ml</li> </ul>	<p><b>SUPREM DUET BOTTLE TOP DISPENSER</b></p> <p>Supreme duet ima recirkulacijski ventil za preusmjeravanje tekućine u bocu i ispiranje instrumenta bez demontaže iz boce.</p> <p>Supreme duet poznat u cijelom svijetu po patentu kojim se dispencer može koristiti na 4 načina; razrjeđivanje, ispiranje, dvostruko rukovanje tekućinom i ponovna cirkulacija,sve u jednom dispenceru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kataloški broj: ABDE11731 kapacitet:0.25-2.5 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11732 kapacitet: 0.50 – 5 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11733 kapacitet:1 – 10 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11734 kapacitet: 2.5 – 30 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11735 kapacitet: 5 – 60 ml</li> <li>• kataloški broj: ABDE11736 kapacitet10 – 100 ml</li> </ul>

### OPIS:

- Svi tipovi dispencora namjenjeni su za sve vrste reagensa osim Fluorovodične kiseline
- Klip:PTFE i ETP
- Cilindar: Borosilikatno staklo
- Kalibracija: individualno kalibriran i certificiran
- Točnost: prema ISO standardu 8655
- Svi tipovi mogu se autoklavirati



### DOSIPET B

Za univerzalnu uporabu; idealan za upotrebu s reagensom prosječne agresivnosti.

- kataloški broj: K83002  
kapacitet: 0.25-2.5 ml
- kataloški broj: K83005  
kapacitet: 0.50 – 5 ml
- kataloški broj: K83010  
kapacitet: 1 – 10 ml
- kataloški broj: K83025  
kapacitet: 2.5 – 25 ml
- kataloški broj: K83050  
kapacitet: 5 – 50 ml
- kataloški broj: K83100  
kapacitet: 10 – 100 ml

**CE**

**IVD**




### DOSIPET S

Za doziranje koncentriranih kiselina, polarnih i nepolarnih otapala.

- kataloški broj: K83070  
kapacitet: 1 – 10 ml
- kataloški broj: K83071  
kapacitet: 2.5 – 25 ml
- kataloški broj: K83072  
kapacitet: 5 – 50 ml

**CE**

**IVD**

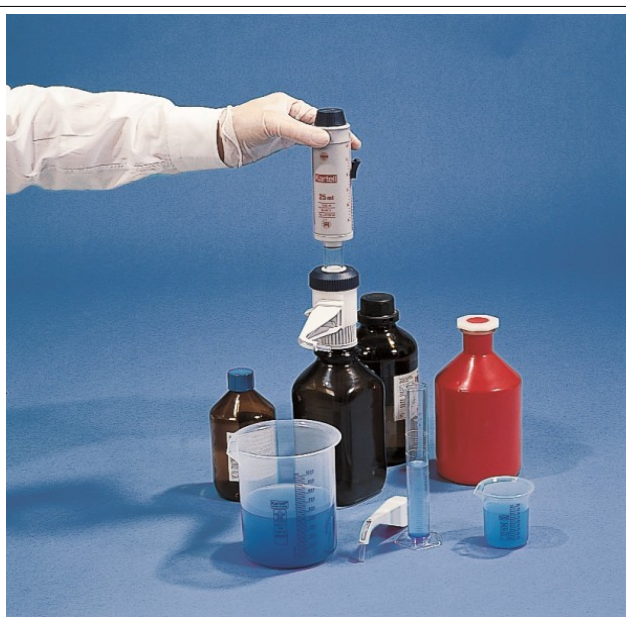

### DOSIPET HF

Za doziranje fluorovodične kiseline.  
Unutarnji dijelovi koji dolaze u kontakt sa kiselinom izrađeni su od visoko rezistentnog materijala PTF i platina-iridij

- kataloški broj: K83080  
kapacitet: 1 – 10 ml
- kataloški broj: K83081  
kapacitet: 2.5 – 25 ml

**CE**

**IVD**



## DOSILAB

Novi model dispnzera namjenjen za sve vrste reagensa osim Fluorovodične kiseline

- kataloški broj: K83082  
kapacitet: 0.25-2.5 ml
- kataloški broj: K83083  
kapacitet: 0.50 – 5 ml
- kataloški broj: K83084  
kapacitet: 1 – 10 ml
- kataloški broj: K83085  
kapacitet: 2.5 – 30 ml
- kataloški broj: K83086  
kapacitet: 5 – 60 ml
- kataloški broj: K830'87  
kapacitet: 10 – 100 ml

**CE**  
**IVD**

Tehničke specifikacije zajedničke za sve tipove:

- precizno i brzo podešavanje pomoću analognog klizača
- precizna mjerna skala
- nema gubitka reagensa prilikom uklanjanja zraka ili punjenja
- punjenje bez stvaranja mjehurića
- klip potpuno prenosi tekućinu sa svakim pokretom
- mogućnost autoklaviranja na + 121 ° C tijekom 20 minuta
- EC sukladnost

Više informacija:  
COPAN ZAGREB d.o.o.  
Tel. 01 2395899  
[info@copan-zagreb.hr](mailto:info@copan-zagreb.hr)